

kompakt

qualitativ

funktionell


Umwelt Parameter Analyzer

Wetterstation

EPA-3



MESA EPA-3 Enviromental Parameter Analyzer – Umwelt Parameter Analyzer mit Messung der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und des Luftdruckes zur Verwendung in Kombination mit den Spirometern der PRO SPIRO Serie.

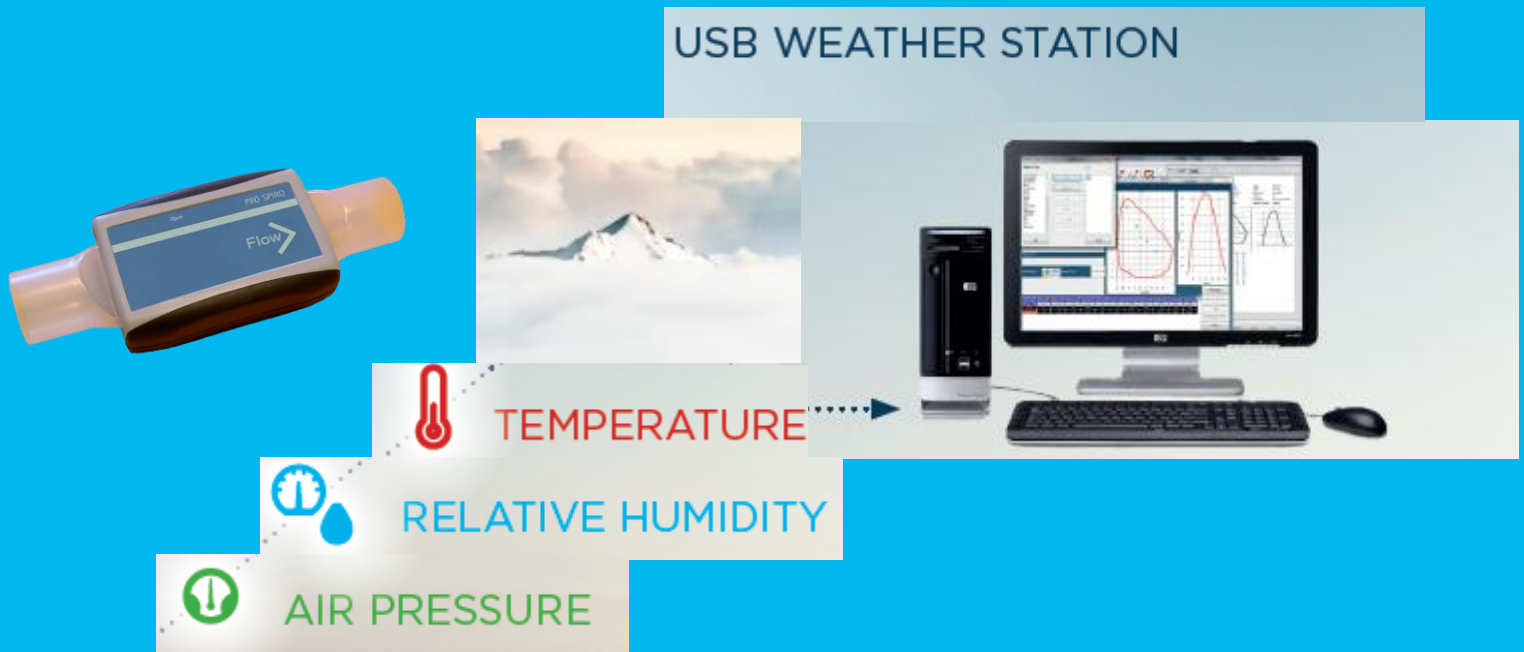

SPEZIFIKATIONEN EPA-3

Messbereiche

Temperatur	0 - 50 ° C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 100 %
Luftdruck	750 – 1200 hPa

Genauigkeit

Temperatur	+/- 1 %
Relative Luftfeuchtigkeit	+/- 3 %
Luftdruck	+/- 1 %

Anschluss **USB**

Der EPA-3 Umwelt Parameter Analyzer ist ein Gerät aufgebaut wie eine Wetterstation und kompatibel zu den MESA PRO SPIRO Spirometern. Der EPA-3 wird am USB-Port des Computers angeschlossen und erfasst sofort automatisch die Umweltbedingungen, die zur Kalibrierung des PRO SPIRO Spirometers relevant sind. Diese Werte werden automatisch in die PRO SPIRO Software übertragen und dort dokumentiert. Die manuelle und zeitintensive Eingabe der Werte entfällt.



MESA Medizintechnik GmbH
Schärfmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO 13485:2016 und sind CE gekennzeichnet.